

FRONTÁLNÍ SCALERY

Jsou určeny pro supragingivální použití, vybroušené ostří a ostrá špička jsou kolmé k terminálnímu dřívku.



R090 H5-L5 Scaler/Kyreta

Instrument dva v jednom pro přední zuby. H5 je rovný tenký scaler, který je vhodný pro odstranění deposit z mezizubního prostoru. Univerzální kyreta Langer 5 je určena pro jemné dokončení ošetření.



R092 H5-L5 Mini Scaler/Kyreta

Mini Lager scaler je určen pro lepší subgingivální adaptaci u předních zubů s anatomickými odchytkami.



R096 N1

Instrument pro použití ve frontálním úseku s prodlouženou lžičkou k odstranění zubního kamene. Nástroj je kombinovaný s malým srpkovým scalerem.



R111 H5-33

Rovný scaler a „jacquette“ scaler pro použití v předních a krčkových oblastech.



R114 NEB128

Dvojitý, tenký, dlouhý, rovný scaler, který je vhodný pro mezizubní, krčkové a všechny přední oblasti.




R128 Cattoni 103-106

Silný scaler, který je určen pro použití pro extrémně odolný zubní kámen.



R091 NEB 128-L5 Scaler/Kyreta

Velmi tenký scaler NEB 128 na jedné straně a univerzální kyreta Langer 5 pro ostatní použití.

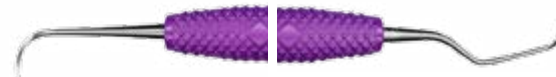

R093 NEB 128-L5 Mini Scaler/Kyreta

Obdobný Langer scaler s mini špičkou, která zlepšuje subgingivální adaptaci u předních zubů s anatomickými odchytkami.



R110 H6-7

Dvojitý srpkový scaler pro použití ve frontálním úseku, v mezizubních prostorech a u premolárů.



R113 U15-33

Silný rovný scaler a „jacquette“ scaler pro použití v mezizubních a předních krčkových oblastech.



R115 NEB 128-33

Dvojitý, tenký, dlouhý, rovný scaler a „jacquette“ scaler, který je vhodný pro mezizubní, krčkové a všechny přední oblasti.



R130 Jack B Nimble

Jedná se o podobný nástroj jako Montana Jack, ale s menším srpkem, který je více pevný, a proto může být použit i pro odstranění cementu. Perfektní pro děti s malými zoubky, rotovanými korunkami nebo linguálně skloněnými zuby a pro ortodontické zámky.