

AMAZING GRACEYS™



VÍCE EFEKTIVNÍ - VÍCE ÚČINNÉ

200-300%

Daleko větší kontakt než u konkurenčních nástrojů. Lepší adaptace znamená méně zbytečných tahů nástrojem. Lepší pro vás i vaše pacienty



TYPY DŘÍKU



Standardní Gracey ostří, ale s daleko větším kontaktem než u konkurenčních nástrojů.



R

R - Rigid - Silnější terminální dřík dělá nástroj tužší a méně pružný, standardní řezná hrana.



ER

ER - Extended Reach - Terminální část dříku je o 5 mm delší, řezná hrana je 3,5 - 4 mm.



ERM

ERM - Extra Reach Mini - Terminální část dříku je o 5 mm delší, řezná hrana je poloviční oproti standardní.



ERMM

ERMM - Extra Reach Micro Mini - Řezná hrana je o 20% tenčí než u ERM, délka řezné hrany je poloviční. Terminální část dříku je prodloužená. Určeno pro velmi úzké choboty, a furkace. Také ve verzi z titanu.

KVADRANT SPECIFICKÉ KYRETY

Design těchto kvadrant specifických kyret umožňuje zvýšit efektivitu vaší práce díky redukci počtu nástrojů, které je nutno použít při ošetření.



R034 Gracey 11-14

Kyreta pro meziální a distální plochy, z pohledu od tváře (bukální strany).



R036 Gracey 12-13

Kyreta pro meziální a distální plochy, z pohledu od tváře (linguální strany).

MICRO MINI GRACEYS **ERMM**

Speciálně broušené kyrety vhodné především do velmi úzkých „kapes“ (chobotů) a furkací díky extra malému ostří.



R011 Gracey 1-2 ERMM

Pro užití ve frontálním úseku.



R012 Gracey 7-8 ERMM

Buko-linguální užití pro stoličky a premoláry.



R013 Gracey 11-12 ERMM

Meziální Micro Gracey kyreta



R014 Gracey 13-14 ERMM

Distální Micro Gracey kyreta

AMAZING GRACEYS™

Efektivní barevné rozlišení

FRONTÁLNÍ



R001 Gracey 0-0

Kyreta s prodlouženým terminálním dříkem a menším řezným ostrím. Také v provedení R (R001R).

R



R016 Gracey 1-2

Oblíbená kyreta pro frontální úsek, pro řezáky a špičáky. Také v provedení R (R016R), ERM (R010), ERMM (R011).

R

ERM

ERMM



R018 Gracey 3-4

Určeno pro řezáky a špičáky.



R020 Gracey 5-6

Pro frontální úsek a premoláry. Také v provedení R (R020R), ERM (R003).

R

ERM

BUKO – LINGUÁLNÍ



R022 Gracey 7-8

Kyreta pro stoličky a premoláry. Také v provedení - R (R022R), ERM (R004) & ERMM (R012).

R

ERM

ERMM



R024 Gracey 9-10

Kyreta s delším dříkem pro stoličky a buko-linguální povrchy. Také v provedení ERM (R005).

ERM

MEZIÁLNÍ



R026 Gracey 11-12

Nejvíce oblíbená meziální Graceyho kyreta. Také v provedení R (R026R), ER (R042), ERM (R006) & ERMM (R013).

R

ER

ERM

ERMM



R030 Gracey 15-16


Kyreta s prodlouženým zpětným tvarováním oproti Gracey 11-12. Také v provedení R (R030R), ER (R044), ERM (R008).

R

ER

ERM

DISTÁLNÍ

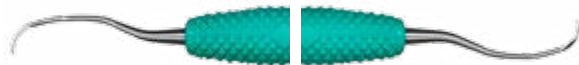

R028 Gracey 13-14

Distální a velmi oblíbená Graceyho kyreta. Také v provedení R (R028R), ER (R043), ERM (R007) & ERMM (R014).

R

ER

ERM

ERMM



R032 Gracey 17-18

Distální kyreta s větším zpětným tvarováním oproti Gracey 13-14. Také v provedení R (R032R), ERM (R009).

R

ERM