

KASIOS TCP

Dental HP

Vysoce porézní syntetická náhrada kostní tkáně


KASIOS TCP Dental HP je syntetická náhrada kostní tkáně s výjimečně vysokou porozitou dosahující 90% a totálním systémem spojitě mikro a makroporozity. Díky této porozitě a chemickému složení (β -TCP), je KASIOS TCP Dental HP po implantaci do kosti nahrazen nově vytvořenou kostní tkání již za 6 až 7 měsíců.

Indikace:

- sinus lift
- augmentace alveolu
- vyplnění nitrokostních defektů
- parodontologické indikace

Porozita:

Celková porozita (makroporozita a mikroporozita) materiálu KASIOS TCP Dental HP se blíží 90%. Makroporézní složka je tvořena vzájemně propojenými póry o velikosti 0,2-0,5 mm. Tato spojitá makroporozita umožňuje kosti vrůstat hluboko do struktury materiálu. Dalším krokem je remodelace kosti, během které se kostní buňky fragmentují a dochází k postupnému tvoření nové kostní tkáně za současné resorpce materiálu.

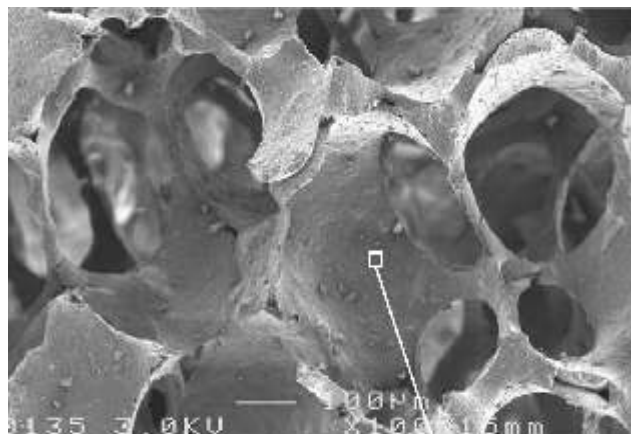


Mikroporézní část materiálu je tvořena mikropóry o velikosti 1 - 5 μ m, které vznikly mezi spojenými zrny TCP při tepelném zpracování materiálu



● 150-500 μ m (0,15-0,5 mm)
parodontologické indikace



● 500 - 1 000 μ m (0,5- 1 mm)
doporučuje se pro augmentaci alveolu
a obecně pro vyplnění středně velkých
defektů kosti

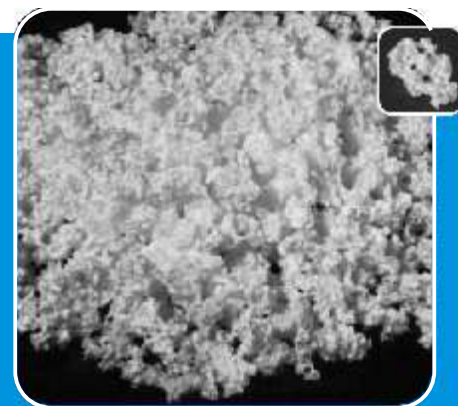

● 1 000 - 2 000 μ m (1- 2 mm)
doporučuje se pro operace sinus lift

Balení: Popis

KASIOS TCP Dental HP 150-500 μ m
KASIOS TCP Dental HP 500-1000 μ m
KASIOS TCP Dental HP 1000-2000 μ m
KASIOS TCP Dental HP 150-500 μ m
KASIOS TCP Dental HP 500-1000 μ m
KASIOS TCP Dental HP 1000-2000 μ m
KASIOS TCP Dental HP 1000-2000 μ m

Kat.číslo

K4070050HP
K4070550HP
K4071050HP
K4070150HP
K4070600HP
K4071100HP
K4071200HP

Balení

Box 5 x 0.5cc
Box 5 x 0.5cc
Box 5 x 0.5cc
Box 5 x 1cc
Box 5 x 1cc
Box 5 x 1cc
Box 5 x 2cc

CRESCO

CRESCO PRAHA,
Jana Přibíka 957/3, 190 00 Praha 9,
Tel/fax: +421 284 821 078
Mobil: +421 603 437 629
e-mail: cresco@volny.cz, www.crescopraha.cz

