



Q-Optics



Q-optics TTL lupové brýle

Q-Optics Through-The-Lens (TTL) lupové brýle jsou přesně přizpůsobeny konkrétním vlastnostem každého uživatele.

Speciální digitální měřicí systém True-Fit® posouvá individualizaci při výrobě těchto lupových brýlí na další, vyšší úroveň a přináší zcela novou kvalitu měřených funkcí pro optimální umístění lupových tubusů.

Pracovní vzdálenosti jsou nastaveny tak, že každá lupa odpovídá normální pracovní poloze uživatele, aniž by se uživatel musel přizpůsobit ohniskové vzdálenosti.

- odolné obroučky vyrobené z titanu
- speciální úprava proti poškrábání lupových tubusů
- voděodolné
- ochranná vrstva proti zamlžování
- nízká váha
- individuální provedení pomocí True-Fit® technologie



Základní typy TTL lupových brýlí Q-Optics

(F2.5x, M3.0x, M3.5x)

zvětšení	model	zobrazované pole	váha
2.5x	F2.5TTL	7 – 10 cm	43.0 g
3.0x	M3.0TTL	5 – 8 cm	36.0 g
3.5x	M3.5TTL	3 – 4 cm	36.0 g

Q-optics prizmatické TTL brýle

Použití nejnovějších typů materiálů a konstrukce těchto brýlí vytváří nejlehčí a nejvíce ergonomický design prizmatických lupových brýlí, jaký byl kdy představen.

Optický systém je umístěn v titanovém pouzdru, obal z karbonových vláken extrémně snižuje hmotnost a způsobuje tak pohodlné usazení brýlí i pro nejstrmější ergonomické úhly.

Pevnost a tuhost konstrukce zajišťuje komfort a dlouhou životnost.

- odolné obroučky vyrobené z titanu
- speciální úprava proti poškrábání lupových tubusů
- voděodolné
- ochranná vrstva proti zamlžování
- nízká váha
- individuální provedení pomocí True-Fit® technologie



Základní typy prizmatických TTL lupových brýlí Q-Optics

(P3.5x) (P4.0x) (P4.5x)

zvětšení	model	zobrazované pole	váha
3.5x	P3.5TTL	8 – 10 cm	53.0 g
4.0x	P4.0TTL	7 – 8 cm	54.0 g
4.5x	P4.5TTL	4 – 5 cm	58.0 g

Q-optics Flip-Up lupové brýle

Veškeré Q-Optics Flip-Up lupové brýle jsou standardně vybaveny exkluzivním E-Hinge™ závěsem pro maximální ergonomické umístění lupových tubusů.

Tradiční flip-style loupes jsou navrženy s dvojitým závěsem, který umísťuje optiku před oko bez ohledu na správnou ergonomickou polohu.

Hinge™ závěs je vybaven velmi dlouhou lištou pro vertikální nastavení, která umožňuje, aby byly lupové tubusy umístěny ve správném ergonomickém úhlu a byly nastaveny samostatně pro správnou výšku.

- odolné obroučky vyrobené z titanu
- speciální úprava proti poškrábání lupových tubusů
- ochranná vrstva proti zamlžování
- nízká váha
- E-Hinge™ závěs pro nastavení optimální ergonomie



Základní typy Flip-Up lupových brýlí Q-Optics

(F2.5x, M3.0x, M3.5x)

zvětšení	model	zobrazované pole	váha
2,5x	F2,5	7-10 cm	55 g
3,0x	M3,0	5-8 cm	46 g
3,5x	M3,5	5-8 cm	46 g

Radiant™ LED Headlight System

- vysoká svítivost
- lithium-iontová baterie
- indikátor stavu baterie
- možnost využití i s jiným typem lupových brýlí
- váha jen 6 g
- životnost LED - 50 000 hodin



Bezdrátový systém osvětlení Radiant™ Light System Cordless Headlight

poskytuje lehký a flexibilní design, který je možné adaptovat na všechny druhy brýlových obrub výrobce se zachováním rovnoměrného rozložení hmotnosti.

- 5 a více hodin provozu (2,5 hodiny na baterii)
- dotykové ovládání ON / OFF
- lehký design (28 gramů)
- rovnoměrné, kruhové světlo
- jas cca 11 000 lux
- rychlé nabíjení USB-C (každá baterie 1 hodina 45 minut)

Obsah :

LED světlo s držákem baterie

2 ks baterie

nabíječka a USB-C kabel

filtr pro práci s materiály vytvrzovanými světlem



Ochranné obličejové štíty pro lupové brýle Pro-TeX

Extra široké kryty obličejové PRO-TEX® (FSX) měří 33 cm přes horní část a 28,5 cm přes bradu.

Tyto štíty jsou určeny pro použití s lupovými brýlemi. (Klipy fungují nejlépe na obroučkách s tenkými rameny do tloušťky 3 mm).

Štíty jsou čiré a průhledné a jsou určeny pro opakované použití.

Štíty lze snadno otřít a dezinfikovat.

Obsah balení: 12 ks (každý štít má své klipy)




Ochranný obličejový štít FS-1

Lehká a pohodlná ochrana před aerosoly a znečištěním

Možnost použití přes lupové brýle a světla

- vhodné pro všechny druhy lupových brýlí
- součástí je adaptér pro světla firmy Q-Optics
- omyvatelný měkký neoprenový pás
- opakovaně použitelný štít
- uzavření štítů shora (Ultra Soft Face Shield) blokuje vniknutí aerosolu a umožňuje použití všech typů lupových brýlí a světel
- čirý polyesterový štít s dlouhou životností lze snadno otřít a dezinfikovat

Obsah balení: náhlavní držák na štíty a světlo (3 ks štítů)

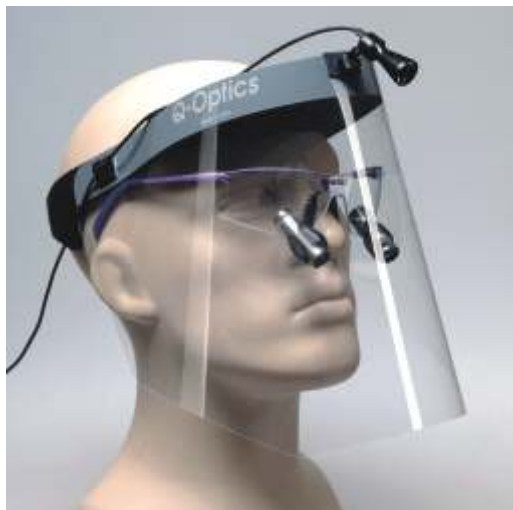

Eclipse-ti

velikost: Regular, Petite



Classic Q877

velikost: 54, 56



Revival Q879

velikost: 51, 53



Barvy brýlových obrub

k dispozici pro všechny typy brýlí



CRESCO PRAHA — Tel/fax: +420 284 821 078 / Mobil: +420 603 437 629
e-mail: info@crescopraha.cz / www.crescopraha.cz / www.q-optics.com

